

Dispositivo de ultrasonidos 3-  
en-1 que adelgaza




Guía del usuario

NuLifeBeauty.com

# Tabla de contenido

Piezas del dispositivo y descripciones .....	3
Comprender el dispositivo .....	4
Modo de empleo: Ultrasonidos.....	5
Modo de empleo: Cont ultrasónico.....	6
Modo de empleo: Infrarrojo.....	7
Cómo utilizar: EMS .....	8
Uso recomendado: Quema de grasa, reducción de la celulitis y la piel reafirmante .....	10
Uso recomendado: alivio del dolor, estimulación muscular y la atrofia muscular Prevención .....	11
Postoperatorio.....	12
Preguntas más frecuentes .....	13
FAQ Cont .....	14
Contáctenos.....	15

# Piezas del dispositivo y descripciones

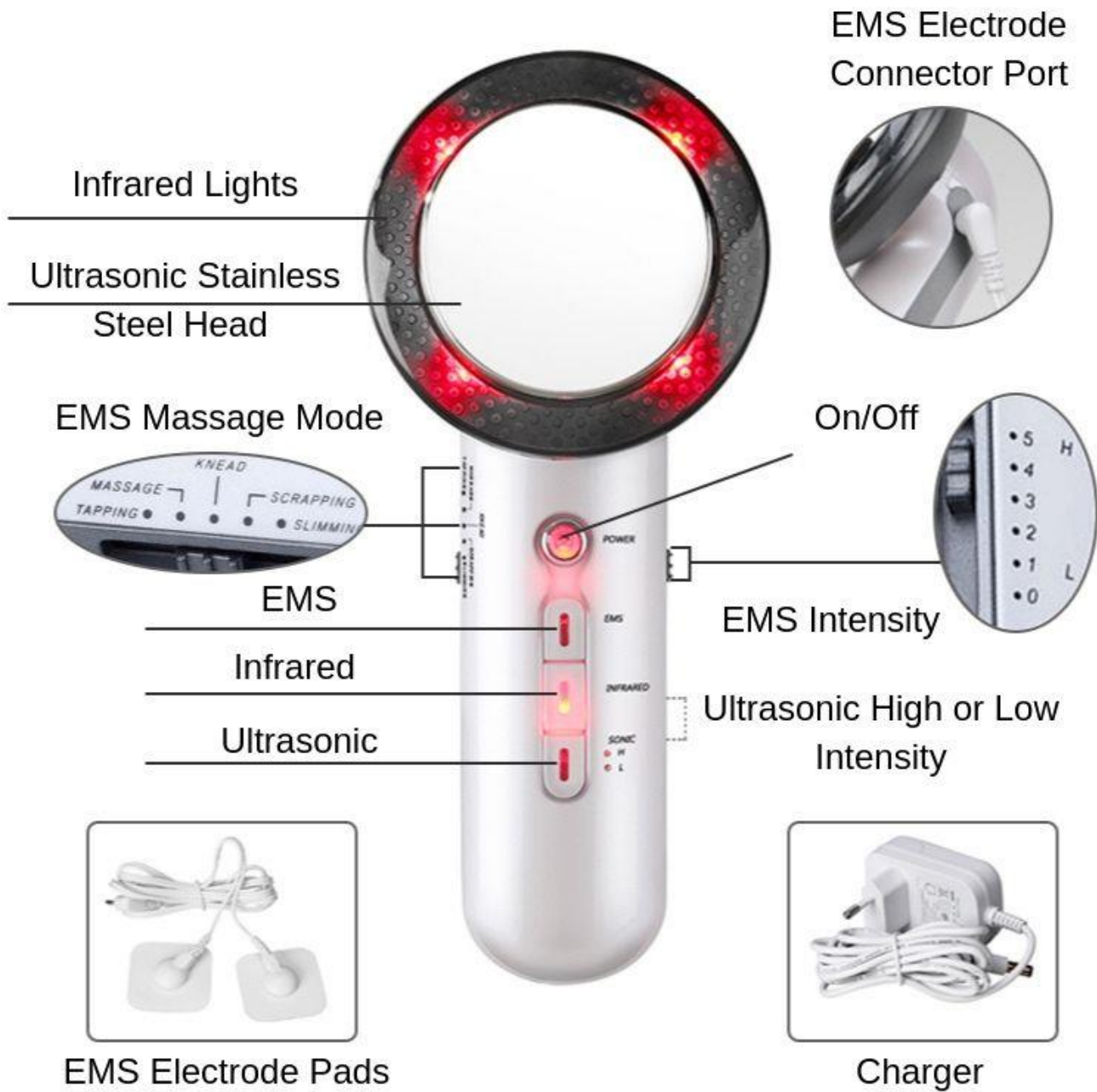

# Comprender el dispositivo

Hay 3 funciones principales a la ultrasónico 3-en-1 dispositivo adelgazante: ultrasónico, infrarrojo y EMS (estimulación eléctrica muscular).

Cada función se utiliza de manera diferente y tiene un propósito diferente.

- Ultrasónico - rompe las células de grasa utilizando ondas ultrasónicas de baja frecuencia (creo que las ondas de sonido).
- Infrarrojos - fortalece y firmas hasta la piel, estimulando la circulación sanguínea y la producción de colágeno utilizando luz infrarroja.
- Ems - alivia el dolor, activa y estimula los músculos utilizando una pequeña carga eléctrica.

Las funciones de infrarrojos ultrasónico y se pueden utilizar juntos para aumentar la eficacia (véase el uso recomendado). La función del ccsme solamente se puede utilizar por separado.

Antes de utilizar cualquier función, tendrá que conectar el dispositivo y pulse el botón "Power" para activarlo. A continuación, puede activar las funciones individuales que desea utilizar.

# Modo de empleo: Ultrasonidos

Encienda el dispositivo pulsando el botón "Power", a continuación, pulse "Sonic" para activar la función ultrasónica. Puede volver a pulsarlo para seleccionar el ajuste "Alto".

**El dispositivo funciona en un principio simple - que envía ondas ultrasónicas de baja frecuencia para los depósitos de grasa debajo de la piel. Al principio puede ser difícil saber si está funcionando. A medida que se enciende se debe sentir alguna vibración o pulsación de la base metálica del dispositivo.**

Puede probarlo poniendo un poco de agua en la base - el agua debe vibrar o pulsate como las ondas ultrasónicas pasan a través de él.

También puede sentir una sensación de calor a medida que empezar a masajear su cuerpo.

**NOTA: Es necesario utilizar una crema o un gel con esta función. Masajear sobre la piel desnuda no será eficaz. La crema / gel proporcionará un mejor contacto con la piel.**




Para obtener los mejores resultados se recomienda el uso de nuestra propia crema totalmente natural anticelulitis. Sin embargo, se puede utilizar cualquier base de crema / gel de agua (tal como un gel ultrasónico) o aceite de coco incluso. Algunos de nuestros usuarios han informado de conseguir grandes resultados utilizando la loción corporal regular también.



# Modo de empleo: Cont ultrasónico

Aplique un poco de crema en el dispositivo o en el área deseada y masajear en movimiento circular, o de ida y vuelta. Tenemos un ejemplo de vídeo en nuestro sitio web: [nulifebeauty.com/how-to](http://nulifebeauty.com/how-to)

Ejemplo del uso:

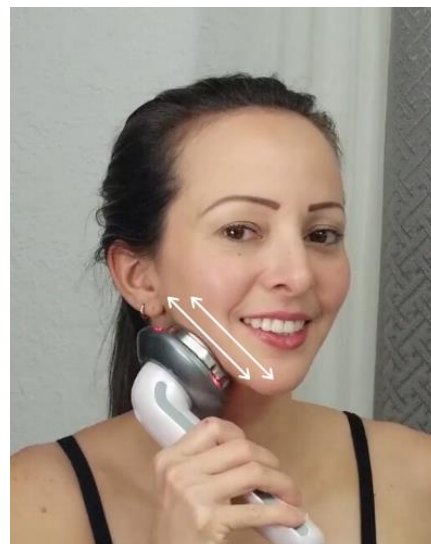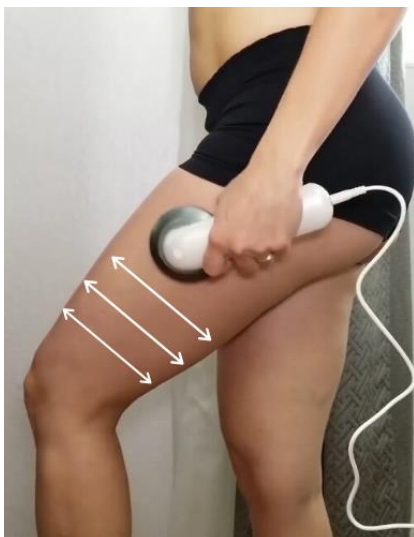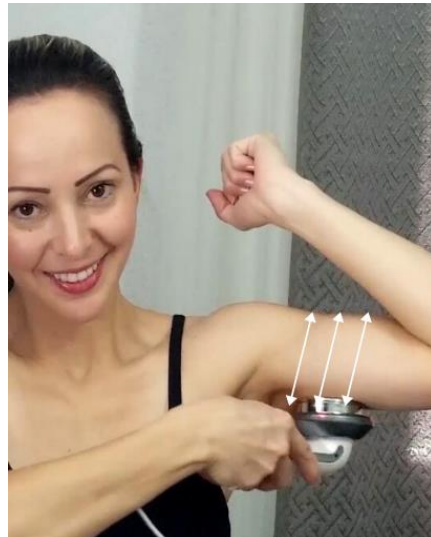

# Modo de empleo: Infrarrojo

Usar el modo de infrarrojos es muy similar al uso del modo ultrasónico mencionado en la página anterior. Recomendamos la combinación de estos dos modos de transporte para obtener los mejores resultados (véase el uso recomendado).

Para activar el infrarrojo, encender el dispositivo pulsando el botón “Power” y pulse luego “infrarrojos”. Las luces LED rojas alrededor de la base de metal del dispositivo debe encenderse.

Como usted está dando masajes a su piel se puede sentir un poco de calentamiento.

Infrarrojos también puede ayudar a reducir las arrugas en la cara.



# Cómo utilizar: EMS

Esta función sólo se puede utilizar con las almohadillas de los electrodos (incluido en la caja). Está destinado a ser utilizado como un masajeador, para aliviar el dolor, prevenir la atrofia muscular y los músculos Activar.

**NOTA: Asegúrese de limpiar cualquier aceites corporales de la zona que va a utilizar las almohadillas adhesivas en. Esto es necesario para extender la longevidad de las almohadillas adhesivas. Después de su uso, utilice un paño húmedo para limpiar las almohadillas adhesivas y el lugar de nuevo cubiertas protectoras en.**

Antes de encender el dispositivo, necesitará:

Adjuntar almohadillas adhesivas a los conectores de electrodos:



Enchufe almohadillas de electrodos a la lateral del dispositivo:






# Modo de empleo: EMS Cont

Coloque las almohadillas adhesivas en la zona deseada, no muy separadas:



Presione el ccsmc en el dispositivo para activar la función. Se puede ajustar el tipo de masaje y la intensidad en el lado del dispositivo. Hay 5 tipo diferente de masajes los simula dispositivos y 5 niveles de intensidad. Se recomienda iniciar bajar en intensidad 0 y subiendo a medida que se sienta cómodo.

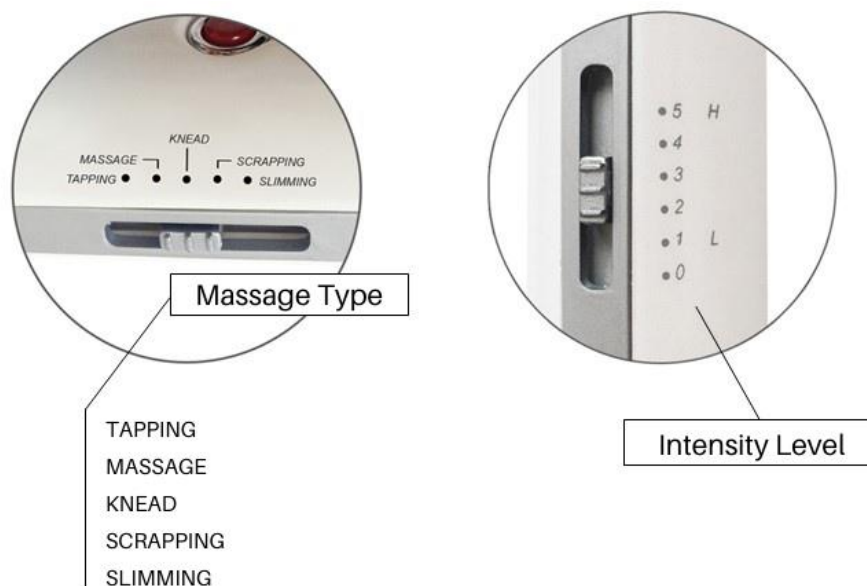

TAPPING, MASAJE y amasar son adecuados para la relajación muscular.  
DESGUACE y adelgazar son para la estimulación muscular activo.

# Uso recomendado: Quema de grasa, reducción de la celulitis y la piel reafirmante

Combinar ultrasónico + infrarrojos 20 minutos diarios.

1. Limpia y seca el área deseada.
2. Enchufe y a su vez en el dispositivo, seleccione ultrasónico + infrarrojos (estas dos funciones se pueden combinar juntos. Ccsme no puede ser combinado). Se puede ajustar la intensidad de baja a alta pulsando el botón "Sonic" dos veces.
3. Aplique un poco de nuestra propia toda anticelulitis Crema natural o su propia crema / gel.
4. Masaje área deseada durante 20 minutos. Si desea trabajar en más de un área, lo hacen por un mínimo de 10 minutos cada uno. El dispositivo tiene un contador de tiempo actual de 10 minutos.
5. base de metal limpio del dispositivo después de su uso. No sumerja en agua.

Si usted tiene más tiempo usted puede comenzar con un masaje ccsme que adelgaza. Usarlo en el área que desea objetivo para cebar los músculos para obtener mejores resultados.

# Uso recomendado: alivio del dolor, estimulación muscular y la atrofia muscular Prevención

Uso ccsme funcionar durante 10-20 minutos.

1. Limpia y seca el área deseada. Asegúrese de limpiar fuera de todos los aceites corporales para extender la longevidad de las almohadillas adhesivas.
2. Conectar electrodos de desfibrilación al dispositivo y al almohadillas adhesivas.
3. Palillo de electrodos de desfibrilación a la zona deseada. Mantenga un poco de espacio entre ellos para llegar a un área más grande de los músculos.
4. Seleccionar el EMS, ajustar la intensidad y el tipo de masaje desde ambos lados del dispositivo. Utilizar durante 10-20 minutos por área. Hasta 30 minutos por sesión.
5. Una vez terminado, almohadillas adhesivas limpias con un paño húmedo y adjuntar las cubiertas de plástico.

Para aliviar el dolor se recomienda cualquiera de los siguientes tipos de masaje: Tapping, masaje o amasar.

Para la estimulación muscular y la prevención de la atrofia se recomienda el masaje desguace.

# Postoperatorio

Después de una sesión de ultrasonidos con el dispositivo, hay ciertas cosas que se pueden hacer para maximizar los resultados. No todos estos pasos son necesarios para ver resultados, pero que sin duda ayudará a optimizar la eficacia de los tratamientos.

**¡Mantente hidratado! - Esto es esencial.** Recomendamos beber 2LS de agua durante un período de 24 horas después de su tratamiento. La cavitación ultrasónica de grasa funciona mediante la eliminación de grasas y toxinas a través de los sistemas linfático y urinario. Su cuerpo necesitará los fluidos necesarios para realizar estos procesos.

Masajear la zona tratada! - Es importante estimular físicamente el área de tratamiento luego de la sesión. Esto promueve el movimiento en la zona que evita que la grasa y las toxinas se estanque y llegar a ser demasiado difícil de eliminar.

Mantener una buena dieta! - Lo mejor es mantener una baja en carbohidratos y la dieta baja en azúcar 12-24 horas de pre-tratamiento y post-tratamiento. Esto es para asegurar la grasa descompuesta por el masaje de la cavitación se quema como energía por el cuerpo.

También se recomienda la obtención de un mínimo de 30 minutos de ejercicio elevadas de la frecuencia cardíaca en los días de tratamiento. Tenga en cuenta que esto no es una solución píldora mágica! Usted tendrá que hacer un esfuerzo constante para ver resultados. Después de nuestro uso recomendado le ayudará a lograr resultados óptimos.

# Preguntas más frecuentes

- **¿Es necesario usar una crema con el dispositivo?**

Sí, necesita una crema o un gel para asegurarse de que la base metálica del dispositivo hace buen contacto con la piel. Para obtener los mejores resultados se recomienda el uso de nuestra propia toda crema natural (disponible en nuestra página web), sin embargo también se puede utilizar cualquier gel / crema a base de agua. Algunos de nuestros clientes afirman haber visto grandes resultados con loción para el cuerpo regular también.

- **¿Realmente funciona?**

Sí, la cavitación ultrasónica de grasa proporciona resultados reales y medibles. Usted será capaz de medir la cantidad de circunferencia que ha perdido el uso de una cinta métrica o simplemente mirando en el espejo. Tenga en cuenta que los resultados no serán vistos durante la noche y los mejores resultados vendrán en días o semanas después de su uso constante. Los resultados también varían en función de su tipo de cuerpo, la historia de salud u otros factores personales únicas.

- **¿Cómo puedo saber si está funcionando?**

La función ultrasónica utiliza ondas ultrasónicas (ondas de sonido) que son difíciles de detectar por los ojos humanos y los oídos. Sin embargo, se debe sentir la base metálica de la vibración en el dispositivo o pulsar a medida que lo está utilizando en su cuerpo. También puede sentir algo de calentamiento. Si no está seguro si el dispositivo está funcionando, puede probar que al dejar caer una pequeña cantidad de agua en la base. Debería ver vibrar el agua o pulsar como las ondas ultrasónicas pasan a través de él. Infrarrojos se indicó que está activado de los LED rojos. Ccsme solamente se puede utilizar con los electrodos incluidos. Puede probarlo uniéndolos a su cuerpo y girando en el ccsme.

# FAQ Cont

- **¿Cuánto tiempo hasta que veo resultados?**

La mayoría de las personas ven resultados dentro de 2-3 semanas con el uso constante. Sin embargo, como cada cuerpo es diferente le pedimos que lo pruebe por un mínimo de 3 semanas. Tenga en cuenta que esto no es una píldora mágica. No hay que esperar que esto funcione si usted lo está utilizando para compensar una mala dieta.

- **¿Se supone que se caliente?**

El dispositivo puede calentarse a medida que lo está utilizando. No debe estar caliente o incómodo en la piel.

- **¿Es seguro utilizar?**

Todos nuestros productos son 100% seguro de usar. Sin embargo, si usted tiene alguna condición médica existente debe consultar a su médico antes de su uso.

- **Voy a experimentar ningún dolor mientras que la usa?**

No, no experimentará ningún dolor. Usted puede sentir algo de sensación de calor o algo de comezón después de su uso. Esto es normal. Si se vuelve suspenda su uso por favor incómodo.

- **¿Hay algún efecto secundario?**

Hay efectos secundarios prácticamente ninguna. En casos raros, algunos usuarios pueden experimentar enrojecimiento de la piel e irritación. Si esto ocurre deje de usarlo por favor, y el área de lavado con agua fría.

Si todavía tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento!

Por favor, vea nuestra página de contacto para obtener más información sobre cómo comunicarse con nosotros.

# Contáctenos

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en acercarse a nosotros!

¡Estaremos encantados de ayudar!

Envíanos un correo electrónico:

[help@nulifebeauty.com](mailto:help@nulifebeauty.com)

Mensaje a nosotros en Facebook o Instagram:

@NuLifeBeautyUSA